

all-reforce

Chassis renforcé



Réalisation sur 4 Implantats

y compris vis, transport gratuit

CHF 1'735.00 (sans TVA)

La nouvelle armature renforcée **all-reforce** avec l'insert en matière synthétique interchangeable vous assure ainsi qu'au patient les avantages suivants:

- Précision maximale grâce à l'insert de friction fabriqué par méthode digitale
- Evite la fastidieuse opération de coulée au laboratoire
- Augmente l'homogénéité de la matière
- Très haute précision de l'insert fraisé en matière synthétique
- Possibilité d'obtenir différentes valeurs de friction de l'insert
- Les inserts sont interchangeables au laboratoire ainsi qu'au cabinet
- Toutes les données sont stockables pour une durée minimale de 10 ans

La friction de l'insert de précision qui se trouve dans le chassis renforcé est très facilement interchangeable.





Le chassis renforcé **all-reforce**

La supra-construction **all-reforce** est réalisée en trois composants compatibles:

- Barre fraisée en titane ou CoCr
- Le chassis renforcé est réalisée par impression 3D en CoCr ou en titane avec une paroi à partir de 0.4mm
- Insert en matière synthétique fraisé et interchangeable

Du fait de la fabrication digitale simultanée des composants, la précision et l'ajustage sont garantis. Les données digitales générées rendent possible en cas de nécessité de réaliser, après coup, un nouvel insert de friction. Un insert facilement interchangeable par vous ou le dentiste en un tour de main.

Grâce à la forme de rétention particulière ; l'insert est maintenu fermement en position. Comme l'insert n'est pas collé, il est facilement et à tout moment interchangeable.

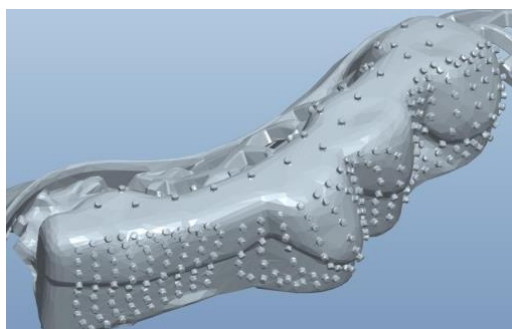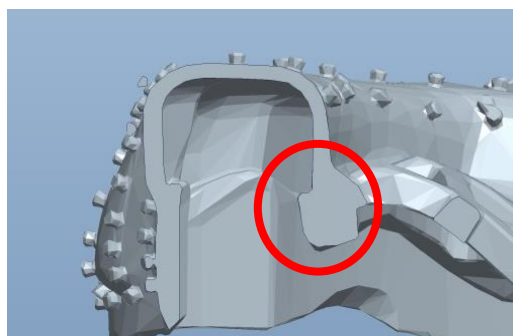

Les perles sur la surface de la structure donnent une rétention mécanique optimale.

Nous vous conseillons volontiers par téléphone ou lors d'un entretien individuel.

allshape AG
Rolliweg 21
2543 Lengnau
032 653 06 06
info@allshape.ch